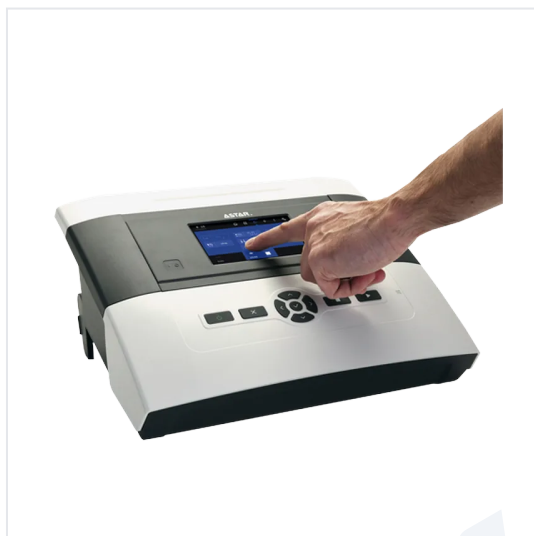


ASTAR

Aparat do magnetoterapii Astar PhysioMG 815

Jednokanałowy sterownik magnetoterapii niskiej częstotliwości z ekranem 5", Spektrum 0–50 Hz i 124 programami. Współpracuje z cewkami CS35/CS60 i aplikatorem CP.

**5 300,00 zł**

brutto (VAT 8%) - netto 4 907,41 zł

Kod produktu	AST-PHYSIOMG-815
Producent	Astar
Dostępność	niedostępny
Waga	7.0 kg
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/aparat-do-magnetoterapii-physiomg-815

Opis

Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów: lekarzy weterynarii, zoofizjoterapeutów i placówek weterynaryjnych. Dobór parametrów zabiegu zawsze należy do osoby prowadzącej terapię.

Aparat do magnetoterapii PhysioMG 815 – wejście do magnetoterapii

Najprostszy sterownik rodziny PhysioMG: jeden kanał, ekran dotykowy 5 cali i pełna baza 124 programów z encyklopedią zabiegową 3D. Współpracuje z cewkami CS35 i CS60 oraz z aplikatorem płaskim CP na statywie. Dla gabinetu, który zaczyna z magnetoterapią i chce jednego, porządnego stanowiska, to zupełnie wystarczający sprzęt.

Zakres kształtów pola jest taki sam jak w droższych modelach: prostokątny, trójkątny, sinusoidalny i impulsowy w wersjach dwu- i jednopółwkowej. Producent podaje, że pole sinusoidalne wybiera się zwykle przy mięśniach, a trójkątne przy stawach; w aparacie jest też Spektrum, czyli płynna zmiana częstotliwości 0–50 Hz w trakcie zabiegu.

Czego w aparacie do magnetoterapii PhysioMG 815 nie ma

- Trybu Dualnego (jeden kanał – jeden aplikator w danym czasie),
- obsługi aplikatora CPEP na pasach,

- obsługi cewki CS75.

Jeżeli któraś z tych rzeczy jest potrzebna, patrz PhysioMG 825 – dopłata jest niewielka.

Porównanie aparatów do magnetoterapii Astar PhysioMG

Model	Ekran	Kanały	Tryb Dualny	Spektrum 0–50 Hz	Aplikatory	Programy wbudowane	Cena brutto
PhysioMG 815	5" dotykowy	1	nie	tak	CS35, CS60, CP	124	5 300 zł
PhysioMG 825	5" dotykowy	2	tak	tak	CS35, CS60, CP, CPEP	213	6 360 zł
PhysioMG 827	7" dotykowy	2	tak	tak	CS35, CS60, CS75, CP, CPEP	264	7 250 zł

Magnetoterapia u psa i kota – jak wygląda stanowisko

Najczęściej: sterownik na półce leżanki, cewka CS60 na systemie jezdny, pacjent ułożony na leżance tak, żeby leczony obszar był w środku cewki. Do kończyn wygodniejsza jest mniejsza cewka CS35 na stoliku z dwiema półkami. Materiały leżanki nie zakłócają pola.

Cena dotyczy samego sterownika. Zestawy z aplikatorami (np. PhysioMG 815 + CS60 + leżanka) wyceniamy na zapytanie – napisz, jakich pacjentów leczysz najczęściej.

W zestawie

- sterownik PhysioMG 815, kabel zasilający
- pas magnetyczny, magnes stały, pasy mocujące, rzep samoprzylepny
- okulary ochronne dla pacjenta, bezpieczniki, rysik, ścierka
- instrukcja, paszport techniczny, karta gwarancyjna, protokół pokontrolny

Dane techniczne

Kod produktu	AST-PHYSIOMG-815
Numer katalogowy producenta	A-UG-AST-PMG815
Producent	Astar
Waga	7.0 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	34.0 × 28.0 × 11.0 cm
Jednostka	szt.

Numer seryjny	nie dotyczy
---------------	-------------

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/aparat-do-magnetoterapii-physiomg-815>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX