


EME

Aparat do magnetoterapii EME Magnetomed 7200, 2 kanały

Włoski aparat do magnetoterapii niskiej częstotliwości z 2 niezależnymi kanałami po 100 Gs, częstotliwość do 100 Hz, przenośny. Aplikatory (cewki, płaskie) dobierane do pacjenta.

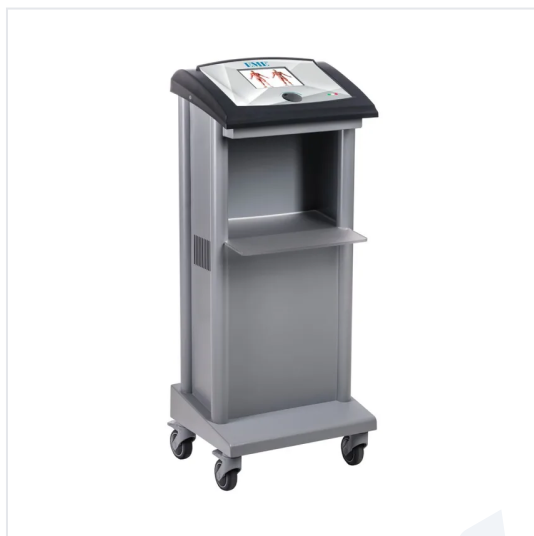

Cena na zapytanie

Kod produktu	EME-MAGNETOMED-7200
Producent	EME
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/aparat-do-magnetoterapii-eme-magnetomed-7200

Opis

Aparat do magnetoterapii EME Magnetomed 7200 – linia Prestige z Włoch

Magnetomed 7200 to przenośny sterownik magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami i 6-calowym ekranem Touch&Scroll. Dwa kanały oznaczają dwa aplikatory naraz – np. cewka dla tułowia i aplikator płaski na staw – albo dwóch pacjentów w sąsiednich boksach.

Producent podaje indukcję 100 gaussów (10 mT) na każdy kanał, częstotliwość do 100 Hz, regulowany współczynnik wypełnienia 10–100 % oraz pamięć 100 protokołów + 200 własnych. Aplikatory EME mają ekranowanie MFC, które według producenta wyraźnie ogranicza pole poza aplikatorem – w ciasnym gabinecie to zaleta.

Aplikatory magnetoterapii do EME Magnetomed 7200

W ofercie EME są solenoidy (cewki) o średnicy 30 i 60 cm z leżanką, aplikatory płaskie 16 × 10 × 3,5 cm oraz aplikatory prostokątne i pasy. Dobór zależy od gatunku i wielkości pacjenta: koty i małe psy – cewka 30 cm, średnie i duże psy – cewka 60 cm z leżanką, konie – aplikatory płaskie na pasach. Konfigurację wyceniamy na zapytanie.

Porównanie aparatów do magnetoterapii EME Magnetomed

Model	Kanały	Indukcja	Częstotliwość	Ekran	Protokoły	Wykonanie
Magnetomed 7200	2	100 Gs na kanał	do 100 Hz	6" Touch&Scroll	100 + 200 własnych	przenośny
Magnetomed 8400	4	100 Gs na kanał	1-100 Hz	320 × 240 Touch&Scroll	81 + 200 własnych	z wózkiem

Magnetoterapia niskiej częstotliwości aparatem EME Magnetomed 7200 u zwierząt

Producent wskazuje wspomaganie regeneracji tkanek, szczególnie kostnej. W praktyce weterynaryjnej magnetoterapię stosuje się po osteosyntezach, przy opóźnionym zroście, w zmianach zwyrodnieniowych stawów i w przewlekłych stanach zapalnych; zabieg nie wymaga golenia ani sedacji.

Dane techniczne pochodzą z katalogu producenta i jego dystrybutorów; wymiary i masę sterownika potwierdzamy przy zamówieniu. Cena na zapytanie – zależy od zestawu aplikatorów.

Dane techniczne

Kod produktu	EME-MAGNETOMED-7200
Producent	EME
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/aparat-do-magnetoterapii-eme-magnetomed-7200>.
Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.