


ZONCARE

Przenośny aparat USG weterynaryjny Zoncare VU3EXP z kolorowym Dopplerem

Przenośny ultrasonograf weterynaryjny z kolorowym Dopplerem: monitor 15,6", trzy aktywne złącza głowic, wymienna bateria i 6,3 kg masy. Presety dla psów według masy ciała, kotów i zwierząt egzotycznych.

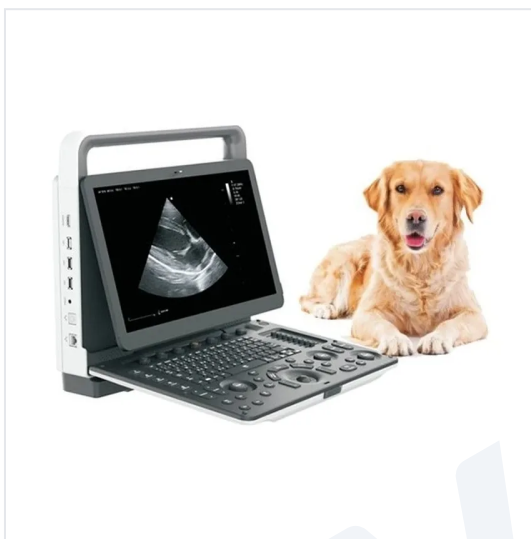

Cena na zapytanie

Kod produktu	ZON-VU3EXP
Producent	Zoncare
Dostępność	niedostępny
Waga	6.3 kg
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/przenosny-aparat-usg-weterynaryjny-zoncare-vu3exp

Opis

Aparat, który jedzie tam, gdzie pacjent

VU3EXP to rozbudowany, przenośny aparat USG z kolorowym Dopplerem w formie laptopa. Waży 6,3 kg, ma wbudowaną, wymienną baterię i 15,6-calowy monitor medyczny obracany w zakresie 75°, więc równie dobrze pracuje na stole zabiegowym, w boksie czy w stajni. Trzy aktywne złącza głowic to w tej klasie rzadkość – do brzucha, serca i tkanek powierzchniowych można mieć podpięte trzy różne głowice bez przepinania.

Presety i pomiary pod weterynarię

Po włączeniu aparat pyta o pacjenta, nie o „typ badania”: pies do 5 kg, 5–15 kg, powyżej 15 kg, kot, zwierzę egzotyczne, a dalej jama brzuszna, tkanki powierzchniowe lub naczynia. Do tego profesjonalne weterynaryjne wzory pomiarowe, rozbudowany system zarządzania danymi i raportowanie. Optymalizacja obrazu jednym przyciskiem i automatyczna obwódka widma Dopplera skracają czas badania.

Ta sama platforma co w aparacie stacjonarnym

VU3EXP pracuje na platformie uSeed (obliczenia CPU + GPU, obrazy zapisywane jako metadane do obróbki po badaniu) i korzysta z tych samych technologii poprawy obrazu, co stacjonarny VU60: Frequency Composite Imaging, obrazowania harmonicznego PIHI i filtracji ZClear. Różnica między aparatami leży w ergonomii i liczbie złączy, nie w jakości obrazu.

Warto wiedzieć: klawiatura jest podświetlana i pokryta folią odporną na zachłapanie, uchwyt na głowicę jest zdejmowany, a porty HDMI, USB 3.0 i USB 2.0 pozwalają podpiąć zewnętrzny monitor i pamięć. Baterię wymienia się bez narzędzi.

Głowice

Zgodne głowice: 8P2MA (phased array single crystal, echo kotów), 3P2PA i 5P1PAA (phased array, echo psów), 6C1PDA (micro-convex), 3C5PDS (convex), 10L2PD, 8L4PF i 7L4PDS (liniowe) oraz 6I6PD (doodbytnicza). Konfigurację głowic ustalamy przy wycenie.



[Z naszego bloga](#)Badanie USG jamy brzusznej u psa i kota – o czym pamiętaćPrzygotowanie pacjenta, ułożenie, stały schemat narządów i dokumentacja – jak zrobić pełne badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej zgodnie z konsensusem ACVR/ECVDI.[Czytaj artykuł »](#)

Dane techniczne

Kod produktu

ZON-VU3EXP

Numer katalogowy producenta	VU3EXP
Producent	Zoncare
Waga	6.3 kg
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/przenosny-aparat-usg-weterynaryjny-zoncare-vu3exp>.
Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX